


**EXPLORE**

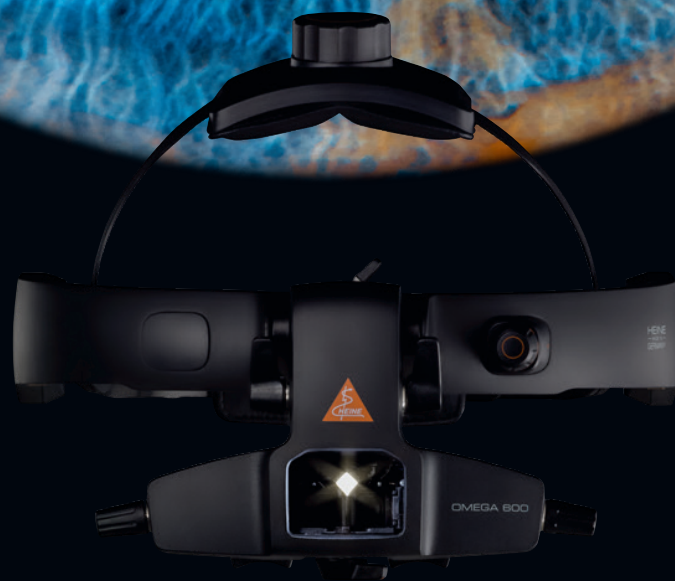

**Scoprite di più.  
Con meno peso.**

HEINE OMEGA 600 oftalmoscopio indiretto

# Alta tecnologia. basso peso.

## **ALL'INTERNO DELL'OCCHIO C'È MOLTO DA SCOPRIRE.**

Spesso si tratta di piccoli dettagli, che fanno però una grande differenza. Ecco perché vi forniamo le migliori ottiche, le immagini più nitide e i colori più affidabili. Unitamente alla capacità di esplorare l'intera retina, periferia estrema compresa. In questo modo, la cura o la terapia ottimale per il paziente può essere decisa sulla base di una diagnosi della massima accuratezza possibile. Ecco perché abbiamo sviluppato l'HEINE OMEGA 600 sulla base dei preziosi consigli dei medici.

## **HEINE OMEGA 600 È IL PIÙ LEGGERO OFTALMOSCOPIO INDIRETTO DI FASCIA ALTA.**

La batteria estremamente compatta ai polimeri di litio è un vero peso piuma che fornisce delle prestazioni assolutamente eccellenti. Con tutti i cavi e i componenti elettronici integrati in un caschetto, questo oftalmoscopio è all'avanguardia. In questo modo, scoprire di più è diventato ancora più confortevole. Provate personalmente HEINE OMEGA 600. Attenti però: una volta provato, non vorrete più farne a meno ...








# Visibilità in tutte le condizioni.


## HEINE visionBOOST.



maggior sicurezza durante le visite dei pazienti con opacità dei media. È stato dimostrato che fornisce una visione della retina migliore fino al 20% nei pazienti affetti da cataratta\*: non importa quali siano le circostanze – sentitevi sempre liberi di utilizzare la luminosità di lavoro ideale per il paziente e l'utilizzatore.

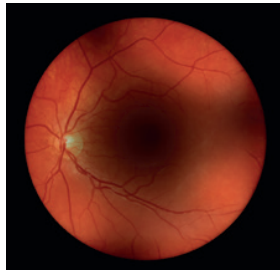

Visione comune di una retina attraverso una cataratta\*\*

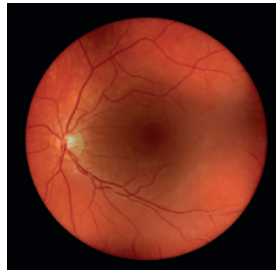

Visione di una retina attraverso una cataratta con visionBOOST\*\*

Fino ad ora, quando la parte anteriore dell'occhio era oscurata da un'opacità dei media, come una cataratta, la retina non poteva essere esaminata o poteva essere osservata solo in misura limitata.

L'esclusivo visionBOOST migliora la visione della retina del paziente fino al 20%.

\*Dati in archivio.

\*\*Tutte le immagini hanno solo scopo illustrativo. I risultati possono variare da paziente a paziente.

# Più leggero. Più luminoso. Più valido.

**smooth**  
SURFACE

## **Doppia imbottitura in similpelle**

Confortevole e facile da pulire

## **Pratico caschetto senza fili**

Nessuna manutenzione e pulizia facile grazie alla smoothSURFACE

## **Batteria ai polimeri di litio ultraleggera**

Autonomia di lavoro fino a 8 ore a seconda dell'intensità di illuminazione

## **Filtro giallo, blu o red-free**

Per adattarsi alle esigenze diagnostiche

## **Superfici senza rilievi per una pulizia semplice**

Grazie alla smoothSURFACE



## ABBIAMO TENUTO IL MEGLIO E MIGLIORATO IL RESTO!

HEINE OMEGA 600 – estremamente confortevole fornisce una nuova classe di innovazione tecnologica.



### **Bloccaggio intuitivo dell'unità ottica**

Semplice regolazione dell'altezza, della distanza e dell'angolo

### **Visione migliore fino al 20 % in presenza di opacità dei media con visionBOOST**

Luce LED<sup>HQ</sup> proprio come serve a voi e ai vostri pazienti: dal 3 a 100 % o addirittura fino al 245 % per l'esame delle cataratte

### **Altamente durevole grazie all'unità ottica sigillata**

Semplice da pulire grazie a smoothSURFACE

### **Visione migliore grazie al vetro frontale non rifrangente**

Ottimizzato per gli esclusivi LED<sup>HQ</sup> che non necessitano di manutenzione

### **Le migliori immagini 3D, per qualsiasi dimensione della pupilla e visioni periferiche**

Grazie alla tecnologia di regolazione stereoscopica



# È possibile diagnosticare solo quello che si vede.

## DIAGNOSI ESTREMAMENTE ACCURATA FINO ALLA PERFERIA PIÙ ESTREMA DEL FUNDUS

- ▶ Una diagnostica decisamente migliore grazie all'esclusivo visionBOOST – anche in presenza di cataratta avanzata
- ▶ Un'immagine del fondo oculare nitidissima grazie ad un'ottica in vetro studiata nei minimi dettagli
- ▶ Le migliori immagini 3D grazie alla tecnologia di regolazione della stereoscopia di HEINE
  - ▷ in presenza di pupille dilatate e non dilatate
  - ▷ anche con neonati e prematuri

## L'OFTALMOSCOPIO INDIRETTO DI FASCIA ALTA PIÙ LEGGERO AL MONDO

- ▶ Indossabile con il massimo comfort
- ▶ Regolazione individuale
  - ▷ Il controllo della luminosità può essere posizionato per utilizzatori destrorsi e mancini
  - ▷ Funzione di esclusione dell'unità ottica per un'interazione più pratica con i pazienti [01]



[01]



# Non misuriamo la durata in anni. Ma in decenni.

## UN INVESTIMENTO DURATURO GRAZIE ALLA COSTRUZIONE ROBUSTA

- ▶ Ottica a prova di polvere e priva di manutenzione
- ▶ Leggendaria durevolezza HEINE
  - ▷ ottica montata fermamente su un telaio di alluminio
  - ▷ materiali di alta qualità
  - ▷ 100 % Made in Germany
  - ▷ esclusiva gestione termica dei LED<sup>HQ</sup>
- ▶ Garanzia di 5 anni sul materiale, sulla lavorazione e sulla costruzione



## DISINFEZIONE SEMPLICE ED EFFICACE GRAZIE A smoothSURFACE

- ▶ Nessuna apertura
- ▶ Elettronica integrata



# Informazione sull'ordine in un colpo d'occhio.



[01]

Oftalmoscopio indiretto <b>OMEGA 600</b> (con batteria e oculare +2D), E4-USBC, oculare 0D* [01]	<b>C-008.33.610</b>
---	---------------------

Charging case <b>CC1</b> [02]	<b>X-000.99.091</b>
-------------------------------	---------------------

Batteria ricaricabile <b>CB1</b> [03]	<b>X-007.99.687</b>
---------------------------------------	---------------------

Alimentatore <b>E4-USBC</b> con cavo [04]	<b>X-000.99.300</b>
---	---------------------

Caricatore da parete <b>CW1</b> [05]	<b>X-095.17.320</b>
--------------------------------------	---------------------

Specchietto per secondo osservatore <b>TM2</b> [06]	<b>C-000.33.212</b>
---	---------------------

Borsa da viaggio OMEGA 600 [07]	<b>C-080.00.000</b>
---------------------------------	---------------------

<b>Set caricatore da parete OMEGA 600:</b> oftalmoscopio indiretto (con batteria e oculare +2D), E4-USBC, oculare 0D*, caricatore da parete CW1	<b>C-008.33.612</b>
---	---------------------

<b>Set da viaggio OMEGA 600:</b> oftalmoscopio indiretto (con batteria e oculare +2D), E4-USBC, oculare 0D*, borsa da viaggio	<b>C-008.33.613</b>
---	---------------------

<b>Set per studenti OMEGA 600:</b> oftalmoscopio indiretto (con batteria e oculare +2D), E4-USBC, oculare 0D*, specchietto per secondo osservatore TM2, borsa da viaggio	<b>C-008.33.614</b>
---	---------------------

<b>Set di ricarica OMEGA 600:</b> charging case CC1, batteria ricaricabile CB1	<b>X-000.99.090</b>
---	---------------------

\*Oculari: Per accomodare al meglio la vostra visuale, potete cambiare gli oculari +2D montati inizialmente con le lenti neutre 0D (fornite con lo strumento).



[03]



[06]



[07]

## TRE MODI PER CARICARE LA BATTERIA



Alimentatore E4-USBC con  
cavo [04]



Caricatore da parete CW1 [05]



Charging case CC1 [02]

# Quality made in Germany.

Viviamo e respiriamo la qualità. In tutto quello che facciamo: in ogni prodotto che fabbrichiamo. In ogni lente che lucidiamo. In ogni vite che serriamo. In ogni fascio di fibra ottica che raggruppiamo. La qualità è sempre in primo piano nei nostri pensieri, ogni singolo giorno.

La durevolezza dei nostri strumenti diagnostici primari è leggendaria. Ogni singolo strumento è il risultato di decenni di sviluppo dei prodotti, di miglioramenti continui, di produzione e di controlli di qualità del 100 % nelle nostre strutture. Assicuriamo in tutto e per tutto che le alte aspettative di qualità siano soddisfatte.

In questo modo assicuriamo che la nostra affermazione “I nostri prodotti di massima qualità consentono la diagnosi più accurata e più precoce possibile” sia sempre veritiera.

Niente di più, niente di meno.

**HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG**

Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany  
[www.heine.com](http://www.heine.com)



Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

04|24. A-000.00.323 IT

